

Presentatie

Referentie: WM 222.190CT


**In hoogte verstelbare medische Dubbel arm, tafel bevestiging aan een kolom.
Ondersteunde weegschaal voor gewichtsverdeling van 2 tot 5 Kg**



Cette colonne possède deux rails de fixation pour les différents éléments qui y seront fixés.
1 rail à l'avant de la colonne,
1 rail à l'arrière

Deze kolom heeft twee bevestigings rails voor de verschillende elementen die eraan zullen worden bevestigd.
1 rail aan de voorkant van de kolom,
1 rail aan de achterkant

This column has two fixing rails for the various elements that will be fixed to it. 1 rail at the front of the column,
1 rail at the back)

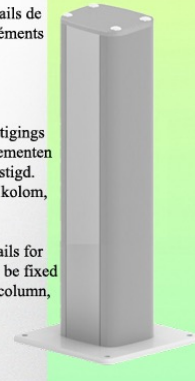


In hoogte verstelbare medische Dubbel arm, tafel bevestiging aan een kolom. Ondersteunde weegschaal voor gewichtsverdeling van 2 tot 5 Kg

De volledige kabelintegratie en de infectiebeheersing met gemakkelijk te reinigen oppervlakken maken deze arm tot het ideale product voor noodgevallen. Hoogteverstelling voor ergonomische en op maat gemaakte monitor positionering. Met deze Horizontale Medische Dubbel Arm met gasveer-hoogteverstelling kan de monitor perfect worden vastgezet, georiënteerd en afgesteld. Het is gecoat met een anti-microbieel middel dat hygiëne en reiniging tot in het kleinste detail biedt. Het moderne ontwerp is speciaal ontworpen voor de gezondheidszorg.

Technische specificaties:


* Geïntegreerde kabeldoorvoer * Potentiaalvereffening * Montage op tafel kolom is optioneel, met verschillende hoogtes beschikbaar (500 - 300 mm). Deze kolommen kunnen gemakkelijk op maat worden gezaagd. Alle kabels worden ook door de kolom geleid. (Zie Optie op de volgende bladzijden)
* Deze horizontale Dubbel arm met gasveer glijdt gewoon in de kolomrail en past zich vervolgens aan de gewenste hoogte aan en wordt vastgezet. Het heeft een veiligheidsstop knop voor de hoogteverstelling, waardoor de arm in de geselecteerde positie kan blijven staan. * De kop van deze arm voldoet aan de VESA MIS-D 75 mm en 100 mm schermbevestiging standaard.* Compatibel met schermen met een gewicht van niet meer dan 2-5 Kg.* Touch screen stabiliteit. * Scherm kantelen: 30° naar beneden en 90° naar boven * Scherm roteren: 130° naar rechts, 180° naar links. * Wapenrotatie: 90° rechts, 90° links * Hoogteverstelling: 45° naar beneden, 45° omhoog * Totale lengte 808 mm * Al onze medische armen zijn CE, ROHS, Medical Grade, de reglementen MDD 93/42 ECC conform. * Kleur RAL 5013 kobaltblauw en RAL 9016 verkeerswit * Garantie: 5 jaar

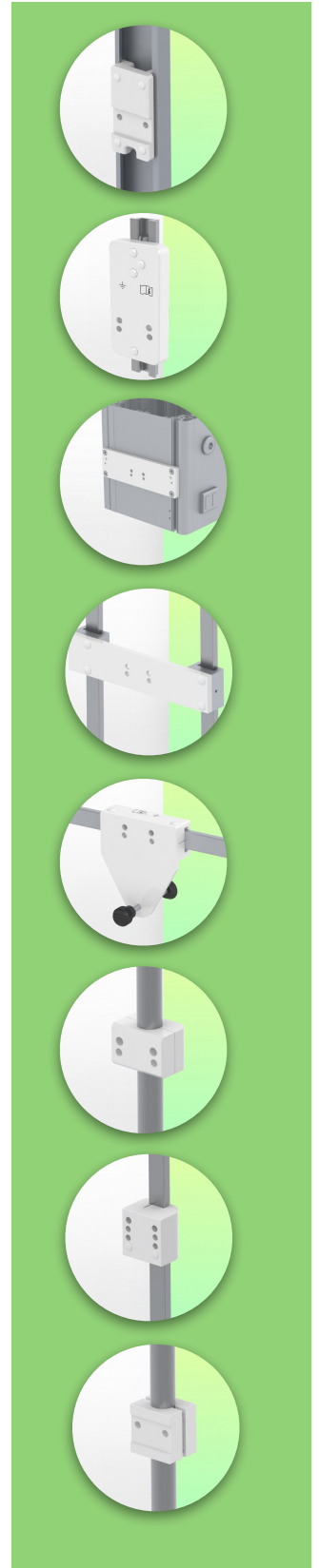

Technische specificaties

Referentie: WM 222.190CT

In hoogte verstelbare medische Dubbel arm, tafel bevestiging aan een kolom.
Ondersteunde weegschaal voor gewichtsverdeling van 2 tot 5 Kg

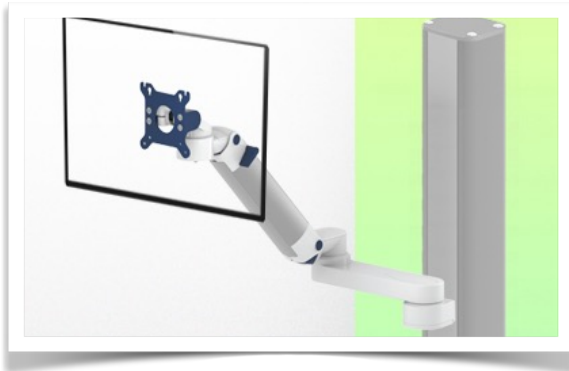


Cette colonne possède deux rails de fixation pour les différents éléments qui y seront fixés.

1 rail à l'avant de la colonne,
1 rail à l'arrière


Deze kolom heeft twee bevestigings rails voor de verschillende elementen die eraan zullen worden bevestigd.

1 rail aan de voorkant van de kolom,
1 rail aan de achterkant


This column has two fixing rails for the various elements that will be fixed to it. 1 rail at the front of the column, 1 rail at the back)

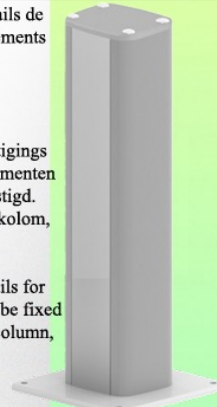

SIDE VIEW - VUE DE CÔTE - ZIJAAZICHT

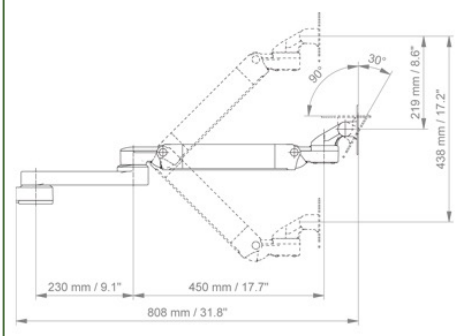

TOP VIEW - VUE DE DESSUS - BOVEN BEKIJKEN

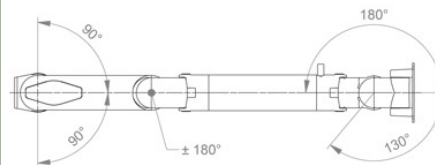

Monitoraanpassing: VESA 75/100 mm

Kleur: Decoratieve onderdelen: RAL 5013 kobaltblauw


Aluminium onderdelen: RAL 9016 verkeerswit

Balansschaal voor deze medische arm: 2 - 5 Kg

Productgewicht: 4,8 Kg

Hoogteverstelling: Parallelmechanisme voor constante kijkhoek

Veiligheid: Heeft een veiligheidsstopknop voor hoogteverstelling, waardoor de medische arm in de gekozen positie kan blijven staan.

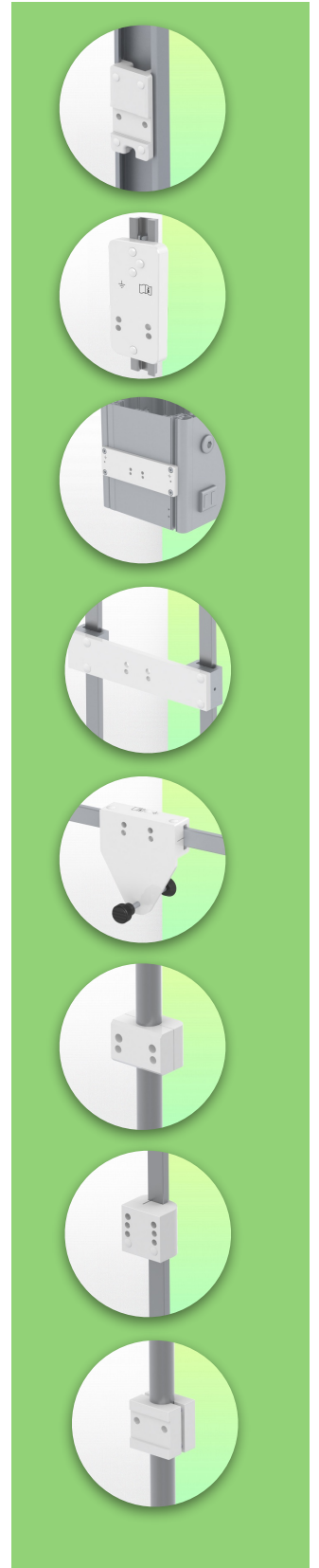





Montage Informatie - Wand glijbaan

Referentie: WM 222.190CT

**In hoogte verstelbare medische Dubbel arm, tafel bevestiging aan een kolom.
Ondersteunde weegschaal voor gewichtsverdeling van 2 tot 5 Kg**

Tafel kolom:

Om deze medische arm te installeren, moet u een van onze medische kolommen gebruiken. Deze zijn verkrijgbaar in standaard hoogtes van 500 en 300 mm. Aangepaste hoogtes zijn op verzoek verkrijgbaar. Afdekkappen en eindkappen worden bij elke bestelling geleverd.

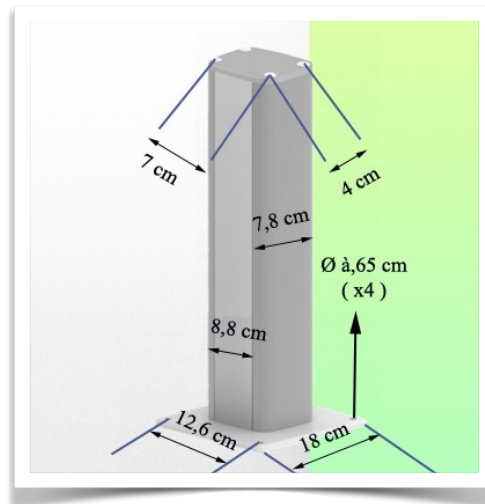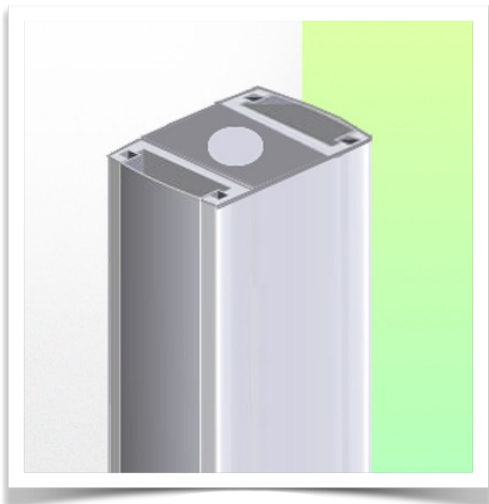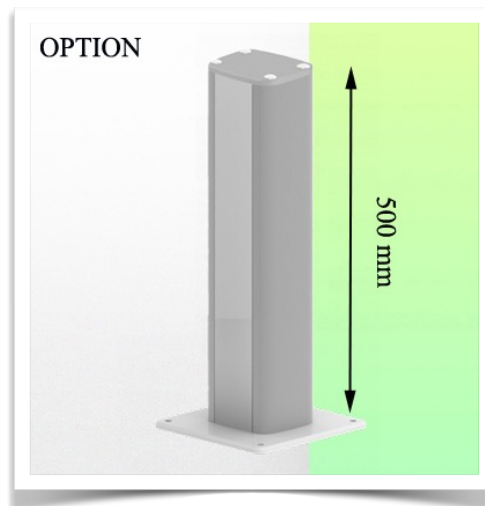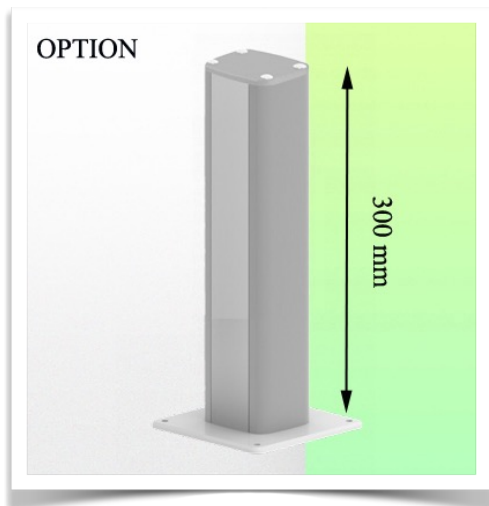

Montage informatie - Montage opties

Referentie: WM 222.190CT

**In hoogte verstelbare medische Dubbel arm, tafel bevestiging aan een kolom.
Ondersteunde weegschaal voor gewichtsverdeling van 2 tot 5 Kg**

Waar wilt u de draagarm bevestigen?


In het ziekenhuis zijn er verschillende manieren om onze beugels te bevestigen: ronde buis, standaard rail, wandrail of op een anesthesie apparaat. Wij zullen u altijd voorzien van de adapter die u nodig heeft.



**Adapter voor verticale
wandschuif**
Voor wand rail montage



**Adapter voor Amico
afstandsbedieningen en
wandpanelen**

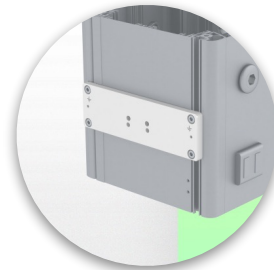


**Adapter voor Mindray
medische
voedingseenheden**



**Dubbele klem voor
verticale standaard rail**
Voor montage op twee
parallele verticale
standaard rails 10 x 25 mm



**Vaste klem voor de standaard
rail**
Voor montage op een
horizontale standaard rail
10 x 25, 8 x 35, 10 x 30,
10 x 50 mm

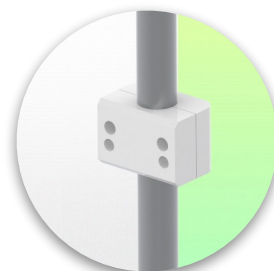


**Vaste klem voor ronde
buis**
Voor montage op ronde buis
ø 25, 35, 38 mm




**Adapter voor Maquet-
anesthesie apparatuur**
Kegeladapter voor model
FLOW i



**Adapter voor Löwenstein
anesthesie apparatuur**
Medische adapter voor
Leon / Leon plus

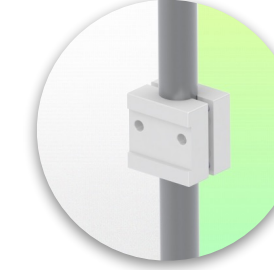

**Universele ronde
buis klem**
V-flens voor montage op
ronde buis ø 23 - 40 mm

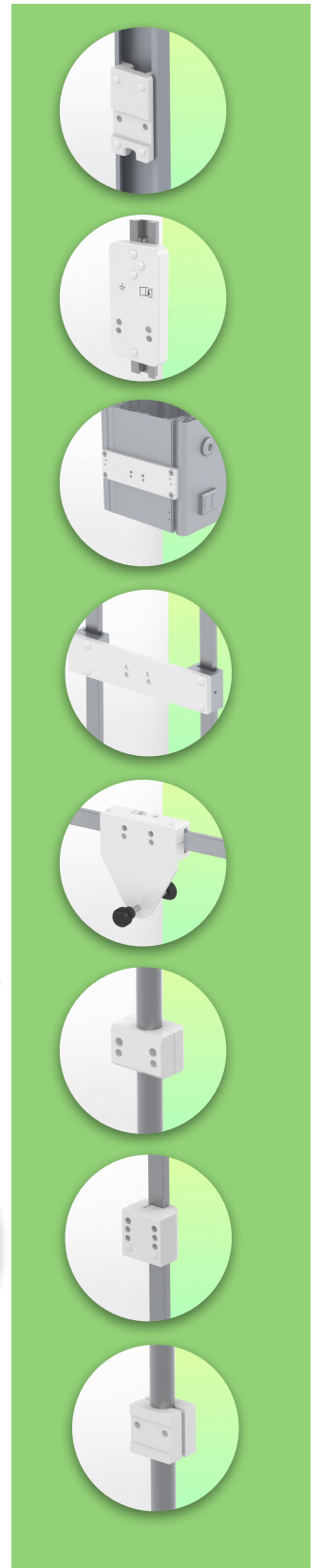




Montage informatie - Montage opties

Referentie: WM 222.190CT

**In hoogte verstelbare medische Dubbel arm, tafel bevestiging aan een kolom.
Ondersteunde weegschaal voor gewichtsverdeling van 2 tot 5 Kg**

Waar wilt u de draagarm bevestigen?



In het ziekenhuis zijn er verschillende manieren om onze beugels te bevestigen: ronde buis, standaard rail, wandrail of op een anesthesie apparaat. Wij zullen u altijd voorzien van de adapter die u nodig heeft.

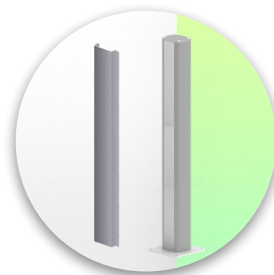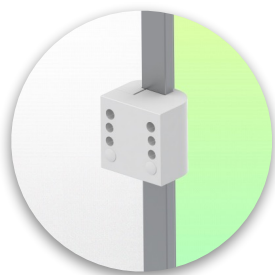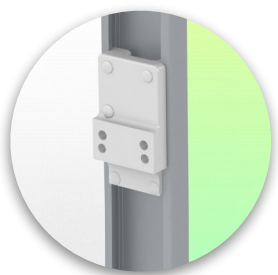

**Adapter voor anesthesie
apparaat (alle
leveranciers)**
H 80 mm, met bestaande
zijhekken

**Klem voor een verticale
standaard rail**
Voor montage op standaard
rail 10 x 25 mm

Tafel kolom
500 mm of 300 mm

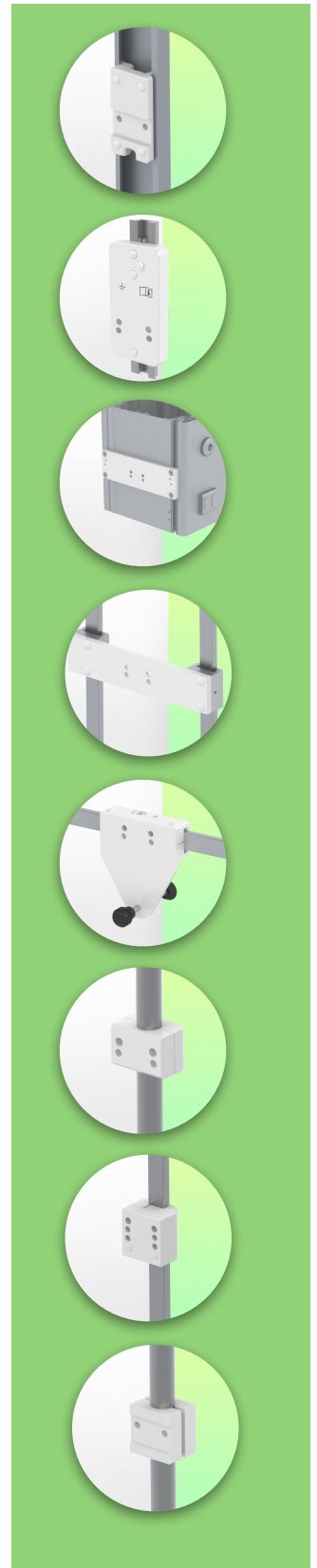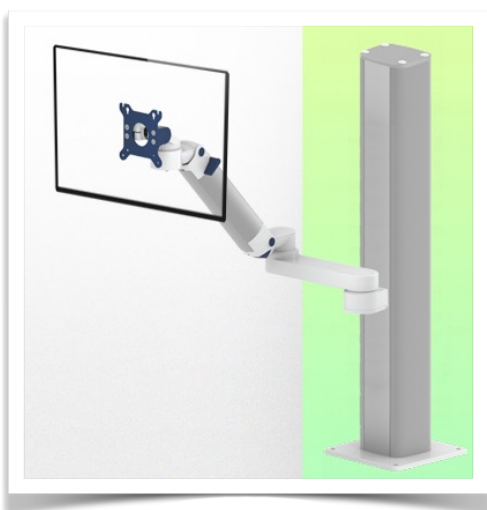

Onze medische montagesystemen worden beschouwd als 's werelds beste op het gebied van geavanceerde hygiënecontroles en omvatten kabelintegratie, een onderhoudsvrije garantie van 5 jaar en naleving van de medische normen. We zijn gewoon de beste ter wereld in wat we doen.

Compatibele accessoires voor deze bevestiging

Referentie: WM 222.190CT

In hoogte verstelbare medische Dubbel arm, tafel bevestiging aan een kolom.
Ondersteunde weegschaal voor gewichtsverdeling van 2 tot 5 Kg

Compatibele accessoires voor deze medische arm

U kunt uw installatie compleet maken met deze extra accessoires:



Drievoudige haak voor kabel
Voor montage op draagarm



Dubbele haak voor kabel
Pour montage sur bras de support



Neerwaartse paal met kabelhaak
Voor montage op draagarm



Dubbele handgreep met VESA-bevestiging
Voor VESA-monitoren



Handgreep voor VESA-monitor ondersteuning
Voor VESA-monitoren



Dubbele haak voor kabel
Voor wand- of kolom rail montage



Drievoudige haak voor kabel
Voor wand- of kolom rail montage



Mand
Voor wand- of kolom rail montage



Neerwaartse pool
Voor montage onder de draagarm

