


Présentation

Référence: WM 222.291CT


**Double Bras Médical ajustable en hauteur, fixation sur colonne au sol ou au plafond.
Poids supporté échelle d'équilibrage de 4 à 9 Kg. Montage en position haute**

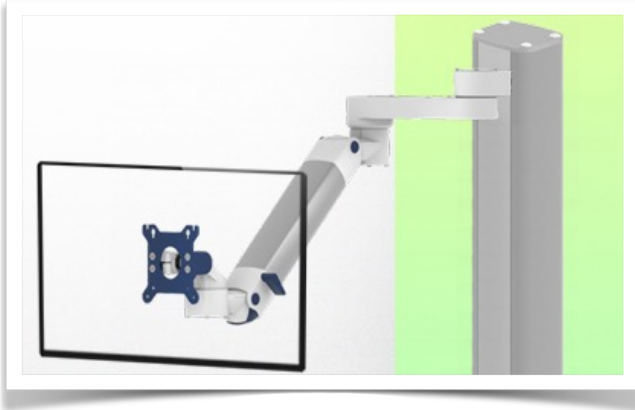

Cette colonne possède deux rails de fixation pour les différents éléments qui y seront fixés.
1 rail à l'avant de la colonne,
1 rail à l'arrière

Deze kolom heeft twee bevestigings rails voor de verschillende elementen die eraan zullen worden bevestigd.
1 rail aan de voorkant van de kolom,
1 rail aan de achterkant

This column has two fixing rails for the various elements that will be fixed to it. 1 rail at the front of the column, 1 rail at the back)

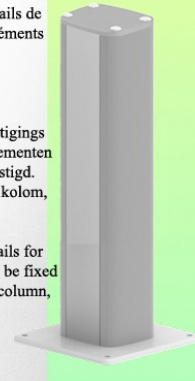

**Double Bras Médical ajustable en hauteur, fixation sur colonne au sol ou au plafond. Poids supporté échelle d'équilibrage de 4 à 9 Kg.
Montage en position haute**

Lorsque le seul point de montage disponible est en hauteur, ce bras gagne ces centimètres supplémentaires cruciaux plus bas pour une facilité ergonomique. Le bras s'étend loin dans l'espace de travail, sa hauteur est réglable et il peut être replié proprement lorsqu'il n'est pas utilisé. Vous avez besoin d'une plus grande portée pour votre moniteur ? Et la seule position de montage disponible est trop haute pour atteindre votre appareil ? Ce bras a été spécialement conçu pour les positions de montage en hauteur. Le bras descend à partir de la première et de la deuxième articulation. L'intégration des câbles offre un environnement de travail propre et soigné. Un bras de qualité médicale avec des surfaces faciles à nettoyer et à contrôler les infections, une garantie de 5 ans et un facteur de sécurité de 6.

Caractéristiques techniques:


* Passage de câble intégré * Liaison équipotentielle * Fixation sur colonne de table en option, dont plusieurs hauteurs sont disponibles (500 - 300 mm). Ces colonnes peuvent être facilement sectionnées à la dimension voulue. Tous les câbles passent également dans la colonne. (Voir Option dans les pages suivantes) * Ce Double Bras à vérin à gaz vient simplement se glisser dans le rail de colonne pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui permet au bras de rester dans la position choisie.
* La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA 75/100 mm.* Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 4-9 Kg.* Stabilité écran tactile. * Inclinaison de l'écran: 30° vers le bas et 90° vers le haut * Rotation de l'écran: 130° à droite, 180° à gauche. * Rotation du bras: 90° à droite, 90° à gauche.* Ajustement en hauteur: 45° vers le bas, 45° vers le haut * Longueur totale 808 mm * Tous nos bras médicaux sont en conformité : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. * Couleur RAL 5013 cobalt blue et RAL 9016 traffic white * Garantie: 5 ans



Caractéristiques Techniques

Référence: WM 222.291CT

**Double Bras Médical ajustable en hauteur, fixation sur colonne au sol ou au plafond.
Poids supporté échelle d'équilibrage de 4 à 9 Kg. Montage en position haute**

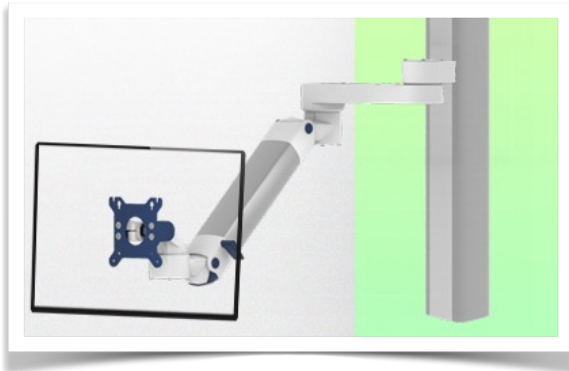




Cette colonne possède deux rails de fixation pour les différents éléments qui y seront fixés.

1 rail à l'avant de la colonne,
1 rail à l'arrière

Deze kolom heeft twee bevestigings rails voor de verschillende elementen die eraan zullen worden bevestigd.

1 rail aan de voorkant van de kolom,
1 rail aan de achterkant

This column has two fixing rails for the various elements that will be fixed to it. 1 rail at the front of the column,
1 rail at the back)

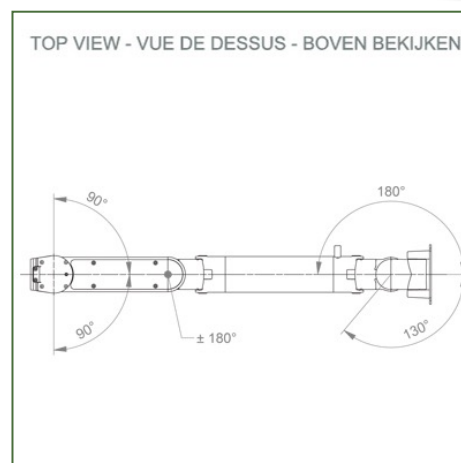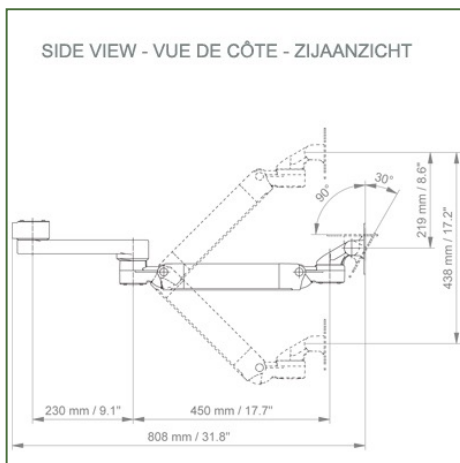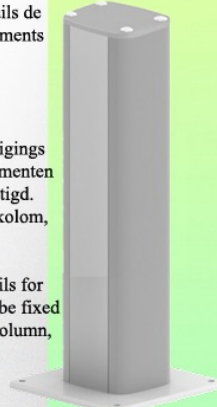

Adaptation du moniteur: VESA 75/100 mm

Couleur: Les pièces décoratives: RAL 5013 cobalt blue



Pièces en aluminium: RAL 9016 traffic white

Echelle d'équilibrage de ce bras médical: 4 - 9 Kg

Poids du produit: 5,2 Kg

Réglage de la hauteur: mécanisme parallèle pour un angle de vue constant

Sécurité: Possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui permet au bras médical de rester dans la position choisie.

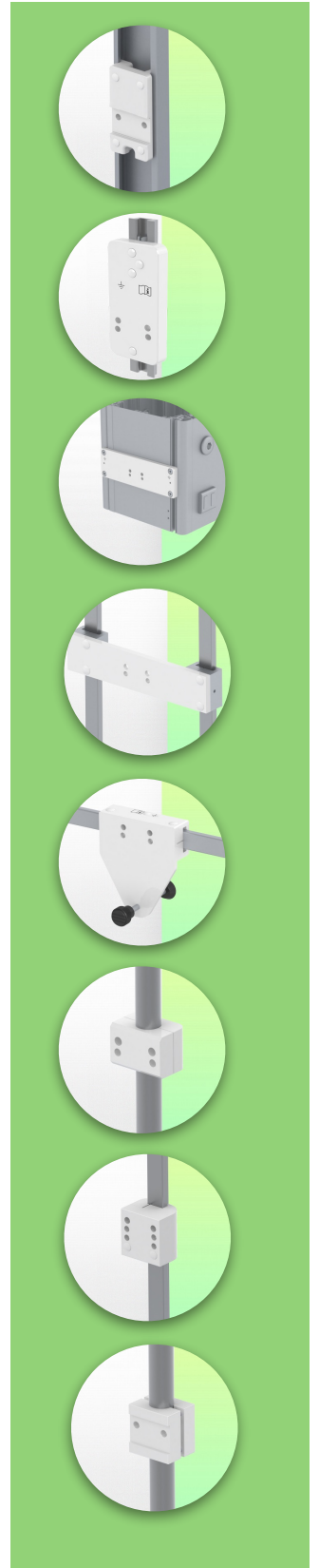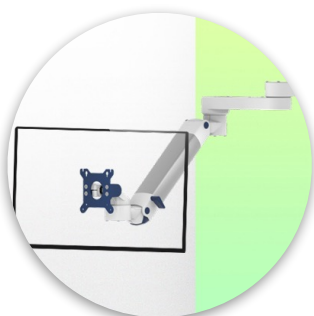




Information pour le montage - Rail à Glissière murale

Référence: WM 222.291CT

Double Bras Médical ajustable en hauteur, fixation sur colonne au sol ou au plafond.
Poids supporté échelle d'équilibrage de 4 à 9 Kg. Montage en position haute

Colonne de table:

Pour installer ce bras médical, vous devez utiliser l'une de nos colonnes médicales. Celles-ci sont disponibles en hauteurs standards de 500 met 300 mm. Des hauteurs sur mesures sont disponibles sur demande. Couvercles de glissières et embouts d'extrémités livrés avec chaque commande.

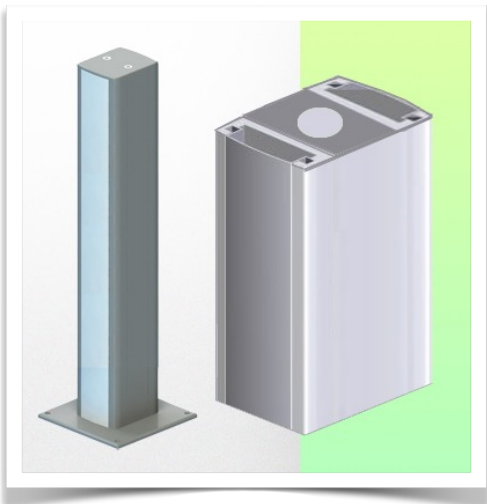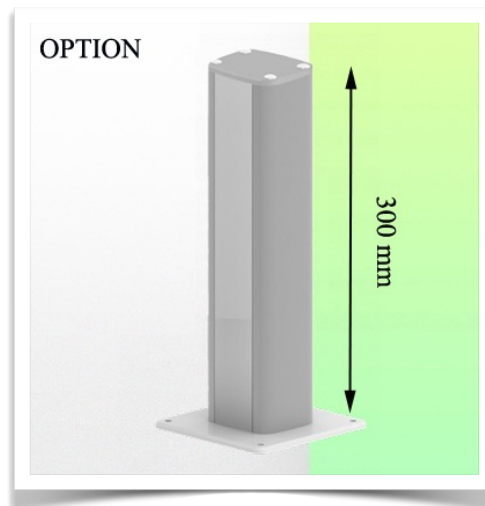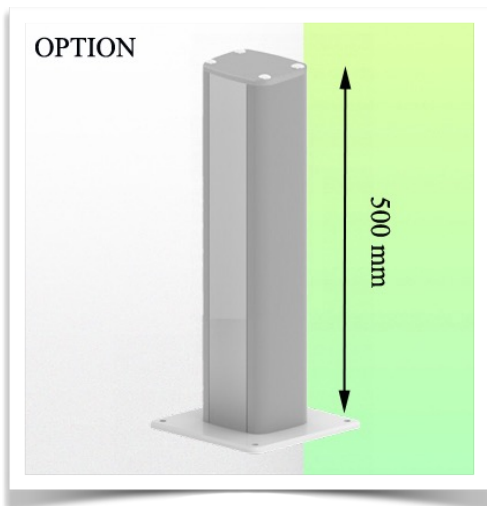

Information pour le montage - Options de fixation

Référence: WM 222.291CT

**Double Bras Médical ajustable en hauteur, fixation sur colonne au sol ou au plafond.
Poids supporté échelle d'équilibrage de 4 à 9 Kg. Montage en position haute**

Où souhaitez-vous fixer le bras de support ?

À l'hôpital, il existe différentes manières de fixer nos supports : tube rond, rail normalisé, glissière murale ou sur un appareil d'anesthésie. Nous vous fournirons toujours l'adaptateur qu'il vous faut.



Adaptateur pour glissière murale verticale
Pour montage sur glissière murale



Adaptateur pour télécommandes et panneaux muraux Amico



Adaptateur pour unités d'alimentation médicales Mindray



Double pince pour rail normalisé vertical
Pour montage sur deux rails normalisés verticaux parallèles 10 x 25 mm



Pince fixe pour rail normalisé
Pour fixation sur un rail normalisé horizontal 10 x 25, 8 x 35, 10 x 30, 10 x 50 mm



Pince fixe pour tube rond
Pour montage sur tube rond \varnothing 25, 35, 38 mm



Adaptateur pour machines d'anesthésie Maquet
Adaptateur en cône pour Maquet FLOW i



Adaptateur pour machines d'anesthésie Löwenstein
Medical Adaptateur pour Leon / Leon plus



Pince universelle pour tube rond
Bride en V pour montage sur tube rond \varnothing 23 - 40 mm



Information pour le montage - Options de fixation

Référence: WM 222.291CT


**Double Bras Médical ajustable en hauteur, fixation sur colonne au sol ou au plafond.
Poids supporté échelle d'équilibrage de 4 à 9 Kg. Montage en position haute**

Où souhaitez-vous fixer le bras de support ?


À l'hôpital, il existe différentes manières de fixer nos supports : tube rond, rail normalisé, glissière murale ou sur un appareil d'anesthésie. Nous vous fournirons toujours l'adaptateur qu'il vous faut.




**Adaptateur pour machine
d'anesthésie
(tous les fournisseurs)
H 80 mm, avec glissière
latérale existante**

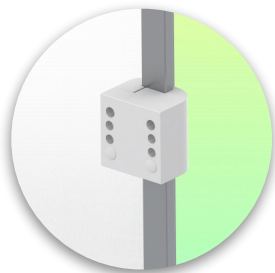


**Pince pour rail normalisé
vertical
Pour montage sur rail
normalisé 10 x 25 mm**

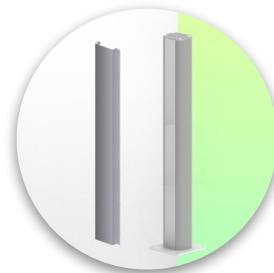

**Colonne de table
500 mm ou 300 mm**

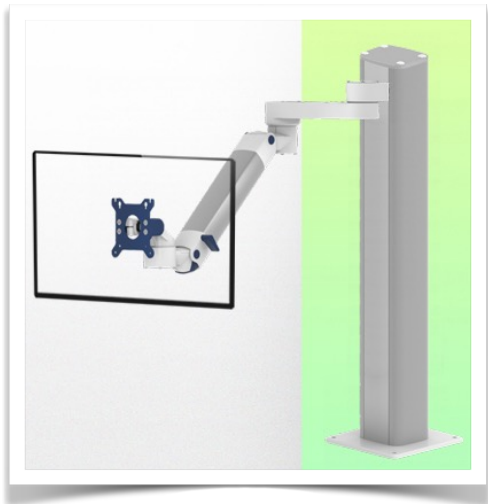

Considérés comme étant les meilleurs du monde en matière de contrôle avancé de l'hygiène, nos systèmes de montage médicaux incluent l'intégration des câbles, une garantie sans entretien de 5 ans et une conformité de qualité médicale. Nous sommes les meilleurs au monde du secteur, tout simplement.

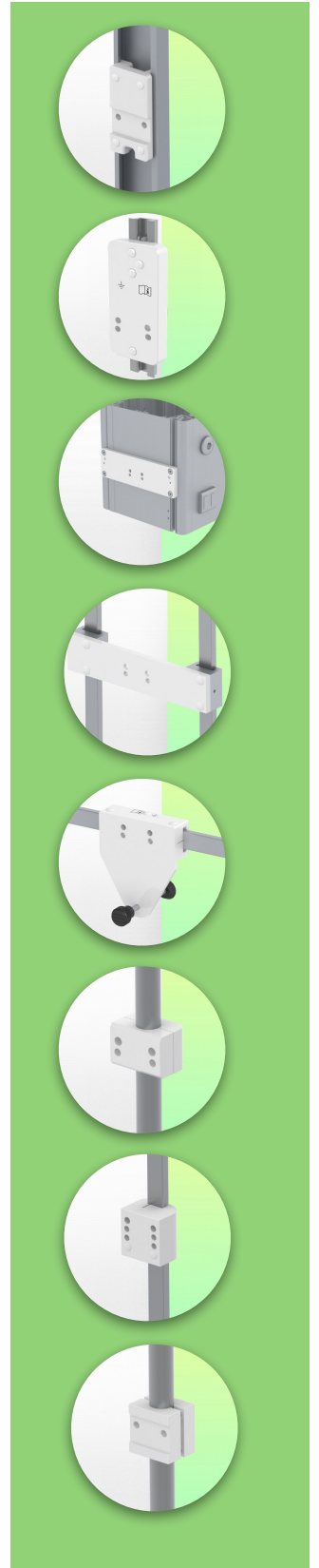

Accessoires compatibles pour cette fixation

Référence: WM 222.291CT

**Double Bras Médical ajustable en hauteur, fixation sur colonne au sol ou au plafond.
Poids supporté échelle d'équilibrage de 4 à 9 Kg. Montage en position haute**

Accessoires compatibles pour ce bras médical

Vous pouvez compléter votre installation avec ces accessoires complémentaires:




Triple crochet pour câble
Pour montage sur bras de support



Double crochet pour câble
Pour montage sur bras de support




Pôle descendant avec crochet pour câble
Pour montage sur bras de support

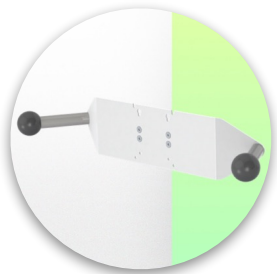

Double poignée avec fixation VESA
Pour moniteurs VESA



Poignée pour support de moniteur VESA
Pour moniteurs VESA

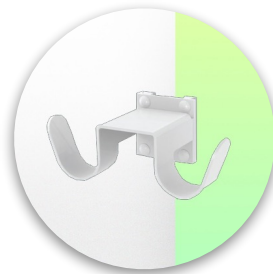

Double crochet pour câble
Pour montage sur glissière murale ou colonne



Triple crochet pour câble
Pour montage sur glissière murale ou colonne



Panier
Pour montage sur glissière murale ou colonne



Pôle descendant
Pour montage sous le bras de support

