


Presentatie

Referentie: WM 222.292CT


**In hoogte verstelbare medische Dubbel arm, tafel bevestiging aan een kolom. Ondersteunde weegschaal voor gewichtsverdeling van 7,5 tot 13 Kg. Bevestiging aan de bovenzijde**

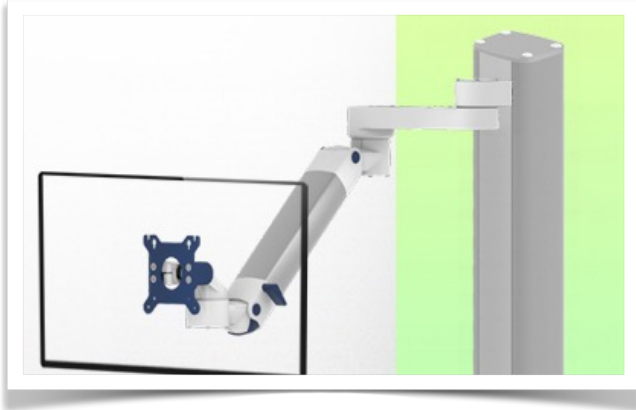

Cette colonne possède deux rails de fixation pour les différents éléments qui y seront fixés.  
1 rail à l'avant de la colonne,  
1 rail à l'arrière

Deze kolom heeft twee bevestigings rails voor de verschillende elementen die eraan zullen worden bevestigd.  
1 rail aan de voorkant van de kolom,  
1 rail aan de achterkant

This column has two fixing rails for the various elements that will be fixed to it. 1 rail at the front of the column, 1 rail at the back)

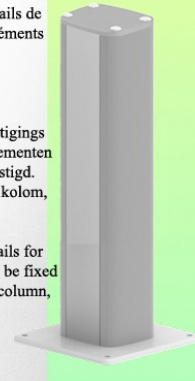

**In hoogte verstelbare medische Dubbel arm, tafel bevestiging aan een kolom. Ondersteunde weegschaal voor gewichtsverdeling van 7,5 tot 13 Kg. Bevestiging aan de bovenzijdeKg.**

Wanneer het enige beschikbare bevestigingspunt hoog is, krijgt deze arm die cruciale extra centimeter lager voor ergonomisch gemak. De arm steekt ver uit in de werkruimte, is in hoogte verstelbaar en kan netjes naar achteren worden geklapt als hij niet wordt gebruikt. Heeft u een groter bereik nodig voor uw monitor? En de enige beschikbare montagepositie is te hoog om uw toestel te bereiken? Deze arm is speciaal ontworpen voor hoge montageposities. De arm stapt uit het eerste en tweede gewricht naar beneden. Kabelintegratie biedt een nette en schone werkomgeving. Een arm van medische kwaliteit met gemakkelijk te reinigen en infectiegevoelige oppervlakken, een garantie van 5 jaar en een 6-voudige veiligheidsfactor.

#### Technische specificaties:


\* Geïntegreerde kabeldoorvoer \* Potentiaalvereffening \* Montage op tafel kolom is optioneel, met verschillende hoogtes beschikbaar (500 - 300 mm). Deze kolommen kunnen gemakkelijk op maat worden gezaagd. Alle kabels worden ook door de kolom geleid. (Zie Optie op de volgende bladzijden) \* Deze horizontale Dubbel arm met gasveer glijdt gewoon in de kolomrail en past zich vervolgens aan de gewenste hoogte aan en wordt vastgezet. Het heeft een veiligheidsstop knop voor de hoogteverstelling, waardoor de arm in de geselecteerde positie kan blijven staan. \* De kop van deze arm voldoet aan de VESA MIS-D 75 mm en 100 mm schermbevestiging standaard. \* Compatibel met schermen met een gewicht van niet meer dan 7,5-13 Kg. \* Touch screen stabiliteit. \* Scherm kantelen: 30° naar beneden en 90° naar boven \* Scherm roteren: 130° naar rechts, 180° naar links. \* Wapenrotatie: 90° rechts, 90° links \* Hoogteverstelling: 45° naar beneden, 45° omhoog \* Totale lengte 808 mm \* Al onze medische armen zijn CE, ROHS, Medical Grade, de reglementen MDD 93/42 ECC conform. \* Kleur RAL 5013 kobaltblauw en RAL 9016 verkeerswit \* Garantie: 5 jaar



## Technische specificaties

Referentie: WM 222.292CT




In hoogte verstelbare medische Dubbel arm, tafel bevestiging aan een kolom. Ondersteunde weegschaal voor gewichtsverdeling van 7,5 tot 13 Kg. Bevestiging aan de bovenzijde

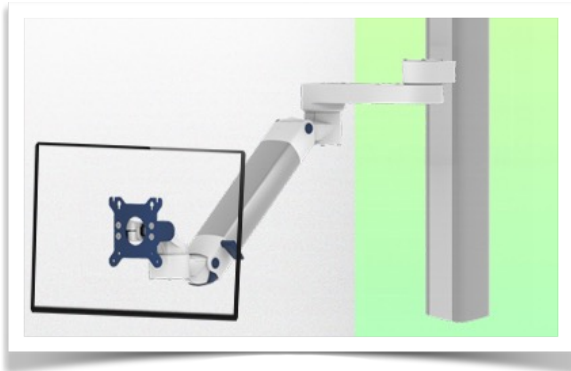

Cette colonne possède deux rails de fixation pour les différents éléments qui y seront fixés.  
1 rail à l'avant de la colonne,  
1 rail à l'arrière

Deze kolom heeft twee bevestigings rails voor de verschillende elementen die eraan zullen worden bevestigd.  
1 rail aan de voorkant van de kolom,  
1 rail aan de achterkant

This column has two fixing rails for the various elements that will be fixed to it. 1 rail at the front of the column,  
1 rail at the back)

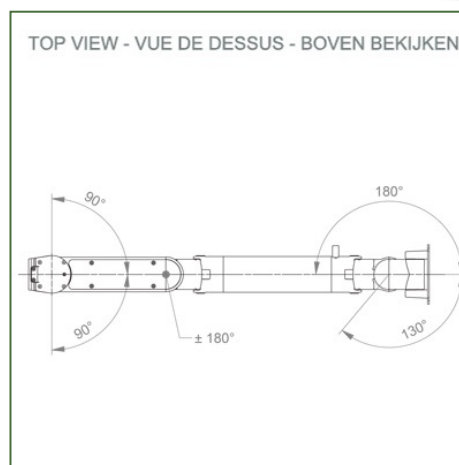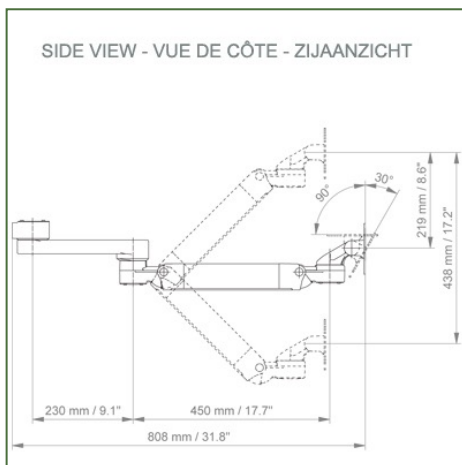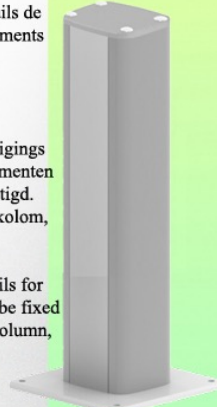

**Monitoraanpassing:** VESA 75/100 mm

**Kleur:** Decoratieve onderdelen: RAL 5013 kobaltblauw

Aluminium onderdelen: RAL 9016 verkeerswit

**Balansschaal voor deze medische arm:** 7,5 - 13 Kg

**Productgewicht:** 5,2 Kg

**Hoogteverstelling:** Parallelmechanisme voor constante kijkhoek

**Veiligheid:** Heeft een veiligheidsstopknop voor hoogteverstelling, waardoor de medische arm in de gekozen positie kan blijven staan.







**Montage Informatie - Wand glijbaan**

Referentie: WM 222.292CT

In hoogte verstelbare medische Dubbel arm, tafel bevestiging aan een kolom. Ondersteunde weegschaal voor gewichtsverdeling van 7,5 tot 13 Kg. Bevestiging aan de bovenzijde

**Tafel kolom:**

Om deze medische arm te installeren, moet u een van onze medische kolommen gebruiken. Deze zijn verkrijgbaar in standaard hoogtes van 500 en 300 mm. Aangepaste hoogtes zijn op verzoek verkrijgbaar. Afdekkappen en eindkappen worden bij elke bestelling geleverd.

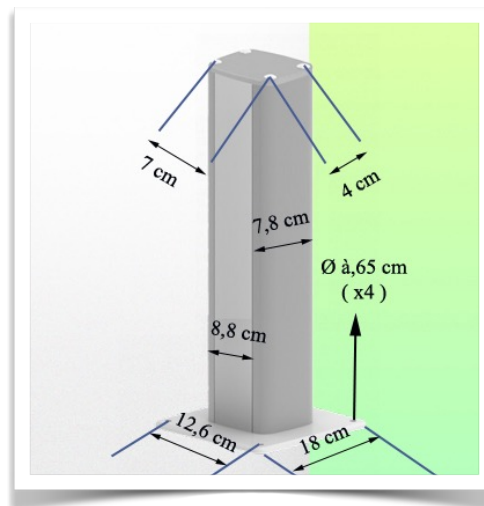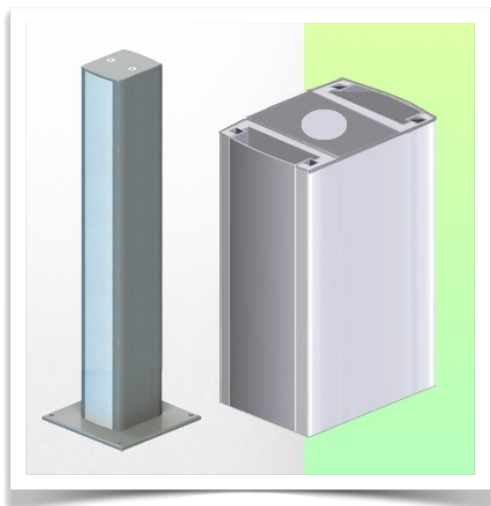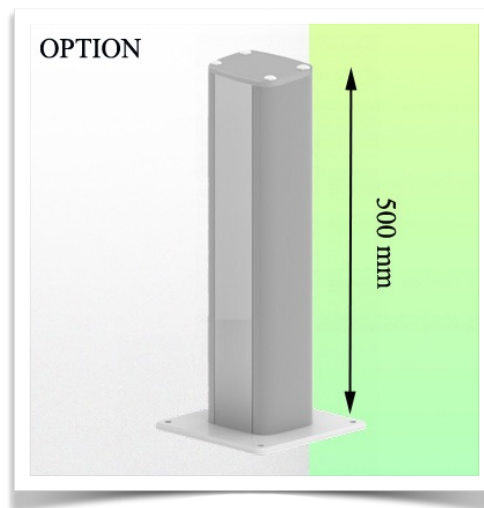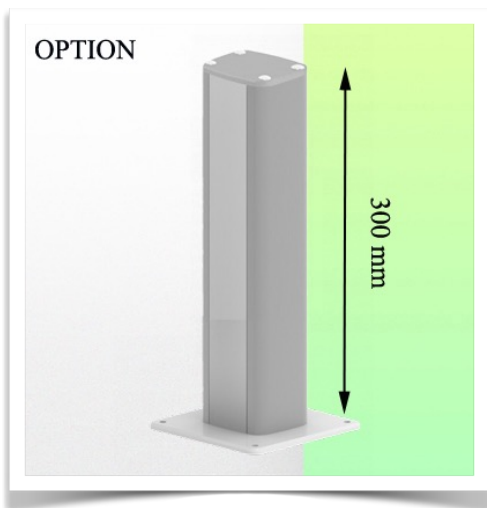


**Montage informatie - Montage opties**

Referentie: WM 222.292CT

**In hoogte verstelbare medische Dubbel arm, tafel bevestiging aan een kolom. Ondersteunde weegschaal voor gewichtsverdeling van 7,5 tot 13 Kg. Bevestiging aan de bovenzijde**

**Waar wilt u de draagarm bevestigen?**


In het ziekenhuis zijn er verschillende manieren om onze beugels te bevestigen: ronde buis, standaard rail, wandrail of op een anesthesie apparaat. Wij zullen u altijd voorzien van de adapter die u nodig heeft.

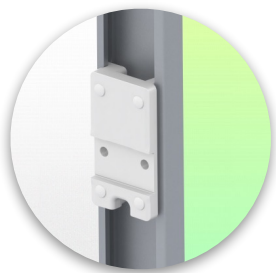

**Adapter voor verticale wandschuif**  
Voor wand rail montage



**Adapter voor Amico afstandsbedieningen en wandpanelen**

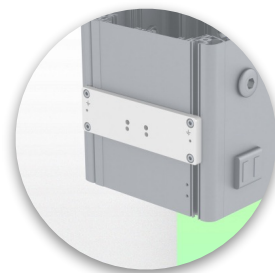

**Adapter voor Mindray medische voedingseenheden**



**Dubbele klem voor verticale standaard rail**  
Voor montage op twee parallelle verticale standaard rails 10 x 25 mm



**Vaste klem voor de standaard rail**  
Voor montage op een horizontale standaard rail 10 x 25, 8 x 35, 10 x 30, 10 x 50 mm



**Vaste klem voor ronde buis**  
Voor montage op ronde buis  $\varnothing$  25, 35, 38 mm



**Adapter voor Maquet-anesthesie apparatuur**  
Kegeladapter voor model FLOW i



**Adapter voor Löwenstein anesthesie apparatuur**  
Medische adapter voor Leon / Leon plus



**Universele ronde buisklem**  
V-flens voor montage op ronde buis  $\varnothing$  23 - 40 mm




**Montage informatie - Montage opties**

Referentie: WM 222.292CT


**In hoogte verstelbare medische Dubbel arm, tafel bevestiging aan een kolom. Ondersteunde weegschaal voor gewichtsverdeling van 7,5 tot 13 Kg. Bevestiging aan de bovenzijde**

**Waar wilt u de draagarm bevestigen?**


In het ziekenhuis zijn er verschillende manieren om onze beugels te bevestigen: ronde buis, standaard rail, wandrail of op een anesthesie apparaat. Wij zullen u altijd voorzien van de adapter die u nodig heeft.

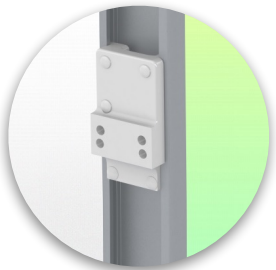


**Adapter voor anesthesie  
apparaat (alle  
leveranciers)**  
H 80 mm, met bestaande  
zijhekken

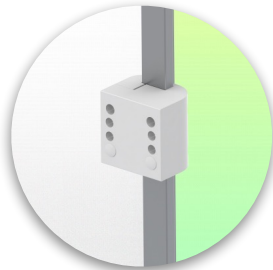

**Klem voor een verticale  
standaard rail**  
Voor montage op standaard  
rail 10 x 25 mm

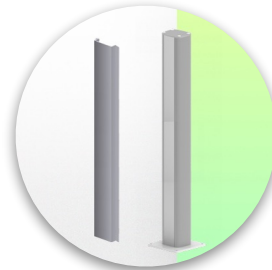

**Tafel kolom**  
500 mm of 300 mm

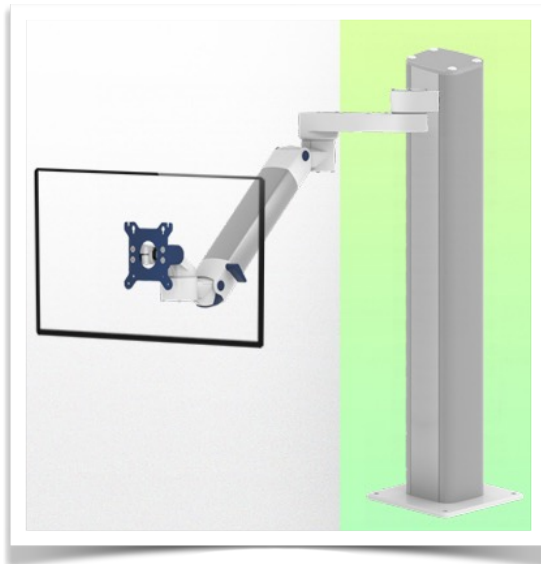

Onze medische montagesystemen worden beschouwd als 's werelds beste op het gebied van geavanceerde hygiënecontroles en omvatten kabelintegratie, een onderhoudsvrije garantie van 5 jaar en naleving van de medische normen. We zijn gewoon de beste ter wereld in wat we doen.

Compatibele accessoires voor deze bevestiging

Referentie: WM 222.292CT

In hoogte verstelbare medische Dubbel arm, tafel bevestiging aan een kolom. Ondersteunde weegschaal voor gewichtsverdeling van 7,5 tot 13 Kg. Bevestiging aan de bovenzijde

**Compatibele accessoires voor deze medische arm**

U kunt uw installatie compleet maken met deze extra accessoires:




**Drievoudige haak voor kabel**  
Voor montage op draagarm



**Dubbele haak voor kabel**  
Pour montage sur bras de support



**Neerwaartse paal met kabelhaak**  
Voor montage op draagarm

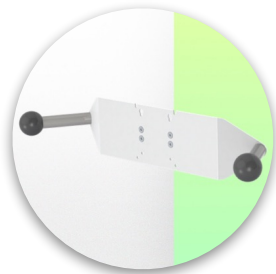

**Dubbele handgreep met VESA-bevestiging**  
Voor VESA-monitoren



**Handgreep voor VESA-monitor ondersteuning**  
Voor VESA-monitoren



**Dubbele haak voor kabel**  
Voor wand- of kolom rail montage



**Drievoudige haak voor kabel**  
Voor wand- of kolom rail montage



**Mand**  
Voor wand- of kolom rail montage



**Neerwaartse pool**  
Voor montage onder de draagarm

