


Presentatie

Referentie: WM 226.106


Medische Combo-arm Plooibaar, 300 mm draaibaar voor scherm en toetsenbord, (ondersteund gewicht tot 18 Kg), vloer- of plafond kolom bevestiging

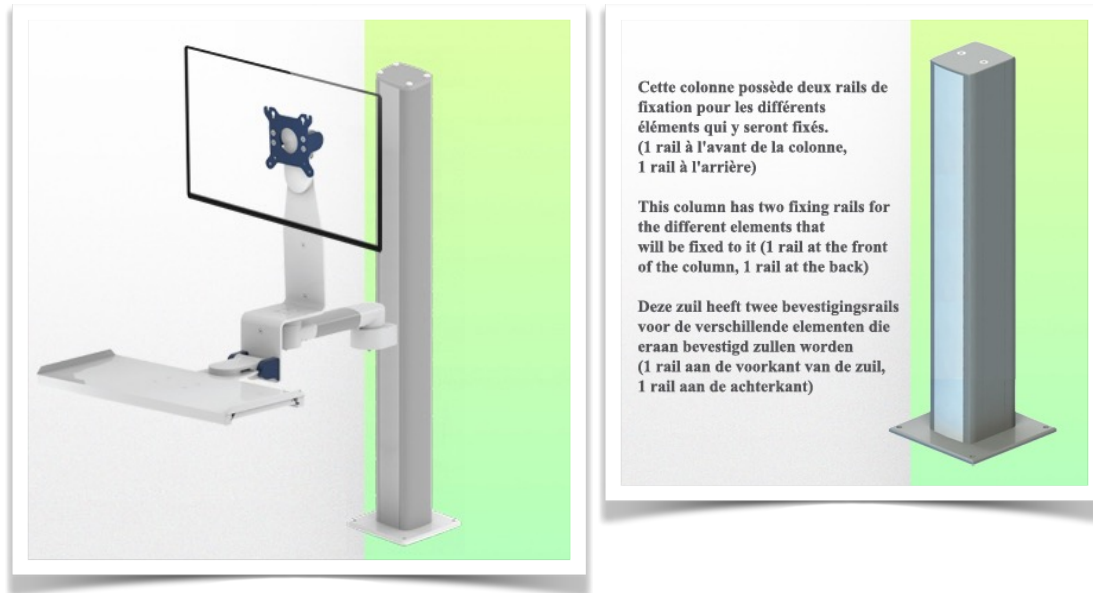

Deze 300 mm lange Medical Arm Combo plooibaar maakt het mogelijk een scherm te bevestigen, te oriënteren en perfect af te stellen, zijn toetsenbordsteun met de afmetingen van 500 x 202 mm die in deze configuratie wordt geleverd, maakt het mogelijk een standaard toetsenbord en een muis op te nemen. Als optie kan hij worden uitgerust met een steun met een rechts/links verschuifbaar plateau voor een muis met afmetingen van 480 x 220 mm voor het toetsenbord en 226 x 220 mm voor de muis of met een grote toetsenbordsteun van 580 x 200 mm.

Technische specificaties:





- * Geïntegreerd kabelmanagement
- * Standaard toetsenbordsteun van 500 x 202 mm plooibaar 90°
- * Montage op vloer- of plafondzuilen is optioneel, met verschillende hoogtes beschikbaar (1500 - 2000 mm). Deze kolommen kunnen gemakkelijk op maat worden gezaagd. Alle kabels worden ook door de kolom geleid. (Zie Optie op de volgende bladzijden)
- * Deze 300mm lange Combo Arm schuift eenvoudig in de rail en past zich vervolgens aan de gewenste hoogte aan en wordt vastgezet. Hij is niet in hoogte verstelbaar, maar biedt wel de mogelijkheid om te draaien.
- * De kop van deze arm voldoet aan de VESA 75/100 mm schermbevestiging norm
- * Compatibel met apparatuur met een gewicht tot 18 Kg.
- * Scherm kantelen: 10° * Arm rotatie: 105° rechts, 105° links.
- * Draaibare toetsenbordsteun: 120° rechts, 120° links
- * Totale lengte van de configuratie 754 mm
- * Kleur RAL 5013 kobaltblauw en RAL 9016 verkeerswit * Garantie: 5 jaar

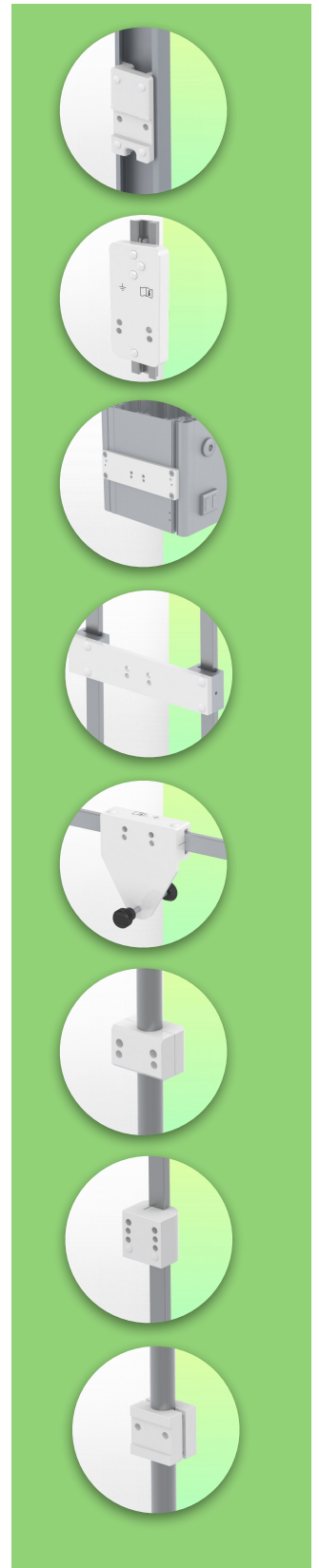

Technische specificaties

Referentie: WM 226.106

Medische Combo-arm Plooibaar, 300 mm draaibaar voor scherm en toetsenbord, (ondersteund gewicht tot 18 Kg), vloer- of plafond kolom bevestiging

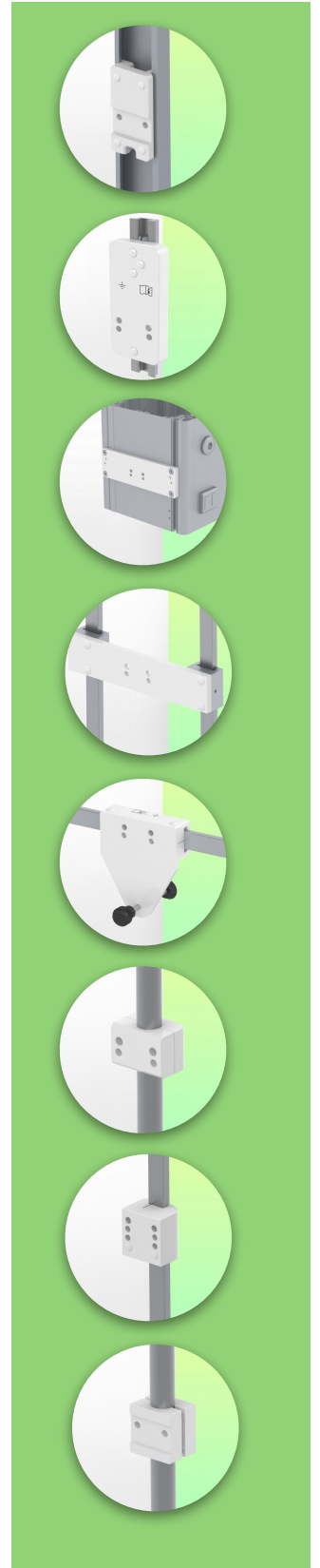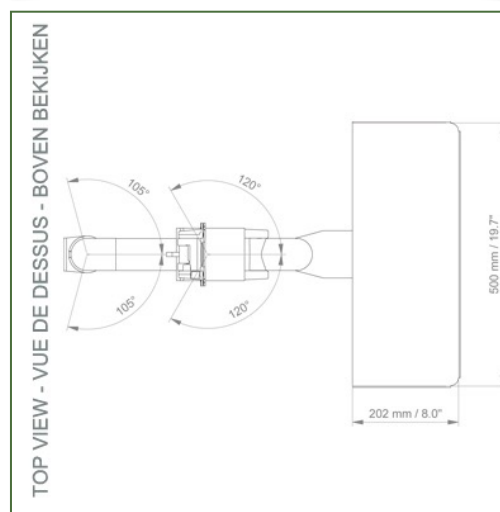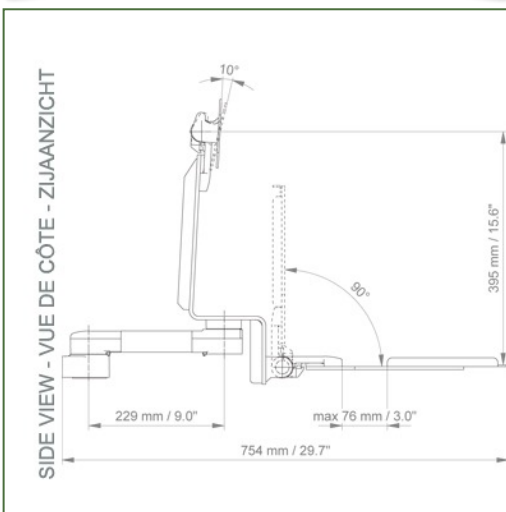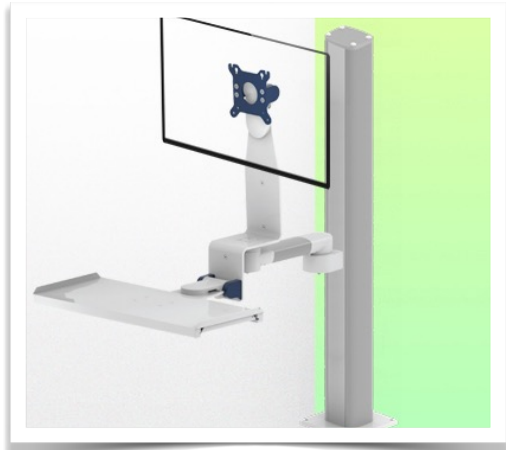

Aanpassing van de monitor: VESA 75/100 mm

Kleur: Decoratieve delen: RAL 5013 kobaltblauw Aluminium delen: RAL 9016 verkeerswit

Max. draagvermogen van de draagarm: 18 kg

Max. draagvermogen aanpassing monitor: 18 Kg

Productgewicht: 5,1 Kg afhankelijk van de grootte van de toetsenbordsteun

Sterke punten van het product:

Niet-hoogteverstelbare arm. Zwenkarmen en verlengde zwenkarmen bieden volledige kabelintegratie en eenvoudige reiniging voor infectiecontrole in alle kritische zorgzones van de klinische omgeving. Onze garantie van 5 jaar garandeert een betrouwbare, probleemloze en onderhoudsvrije werking. De draaifunctie op het bevestigingspunt en de kantel- en zwenkfunctie van de monitoradaptatie bieden een optimale positionering van uw toestel. De zwenkarm in zijn verlengde versie is een tweedelige arm met een centraal scharnierpunt tussen de twee armdelen. Alle onderaan gemonteerde monitoren hebben de veiligheidsfunctie van een 20° kantelstop.







Montage-informatie - Muur schuif rail

Referentie: WM 226.106

Medische Combo-arm Plooibaar, 300 mm draaibaar voor scherm en toetsenbord, (ondersteund gewicht tot 18 Kg), vloer- of plafond kolom bevestiging

Vloer of plafond kolom:

Om deze medische arm te installeren, moet u een van onze medische kolommen gebruiken. Deze zijn verkrijgbaar in standaard hoogtes van 1500 en 2000 mm. Aangepaste hoogtes zijn op verzoek verkrijgbaar. Afdekkappen en eindkappen worden bij elke bestelling geleverd.

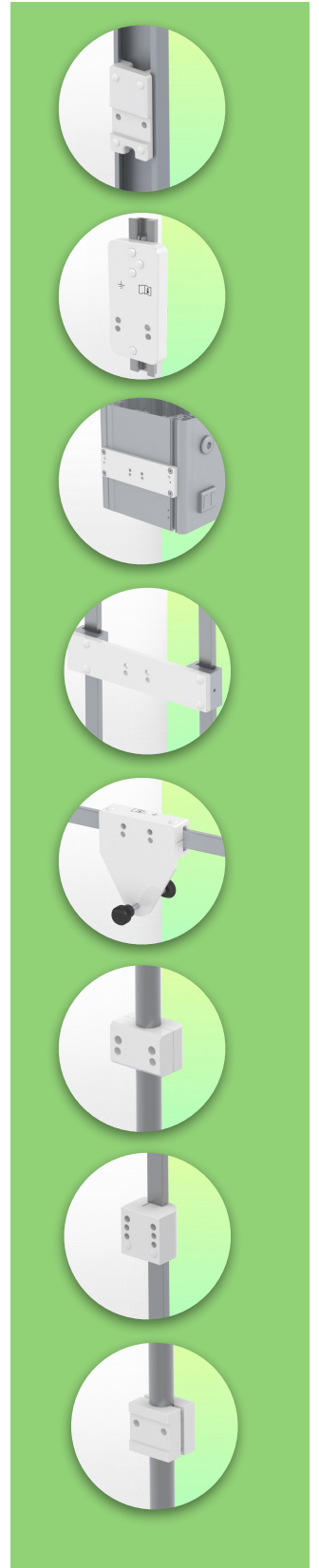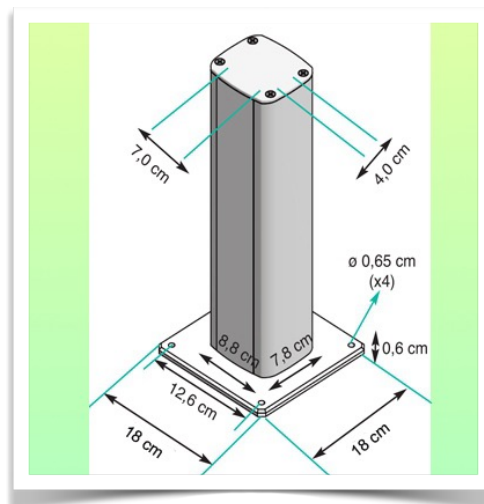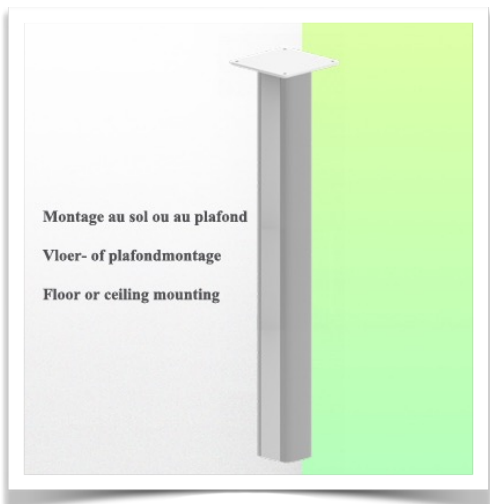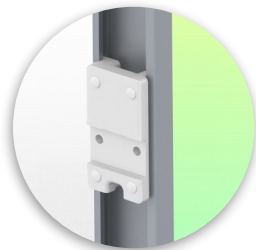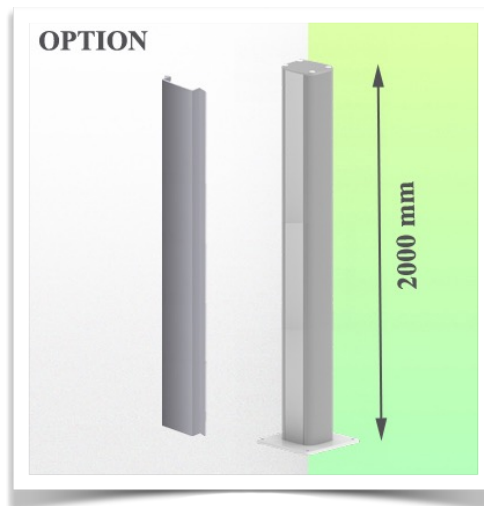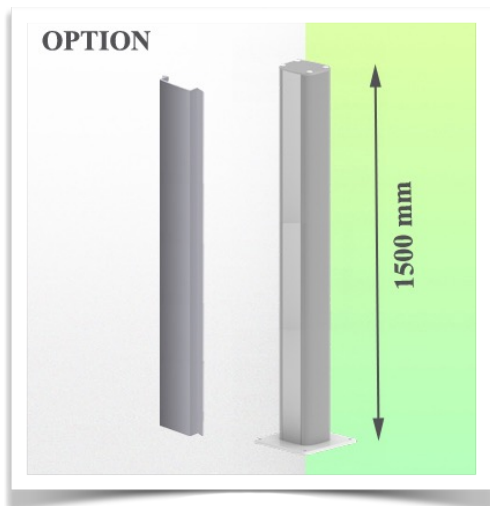


Montage-informatie - montage-opties

Referentie: WM 226.106

Medische Combo-arm Plooibaar, 300 mm draaibaar voor scherm en toetsenbord, (ondersteund gewicht tot 18 Kg), vloer- of plafond kolom bevestiging

Waar wilt u de draagarm bevestigen?


In het ziekenhuis zijn er verschillende manieren om onze beugels te bevestigen: ronde buis, standaard rail, wandrail of op een anesthesie apparaat. Wij zullen u altijd voorzien van de adapter die u nodig heeft.

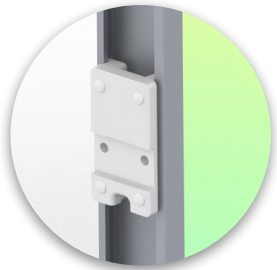


Adapter voor verticale wandschuif
Voor wand rail montage




Adapter voor Amico afstandsbedieningen en wandpanelen

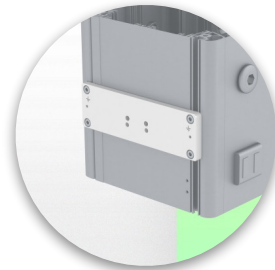


Adapter voor Mindray medische voedingseenheden

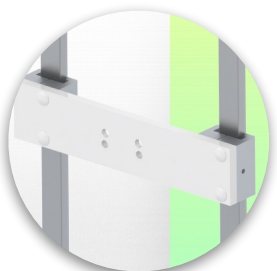


Dubbele klem voor verticale standaard rail
Voor montage op twee parallelle verticale standaard rails 10 x 25 mm

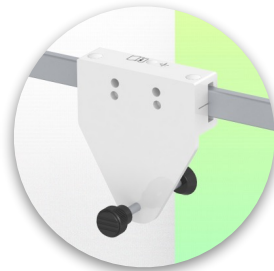


Vaste klem voor de standaard rail
Voor montage op een horizontale standaard rail 10 x 25, 8 x 35, 10 x 30, 10 x 50 mm

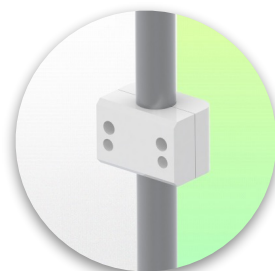


Vaste klem voor ronde buis
Voor montage op ronde buis \varnothing 25, 35, 38 mm

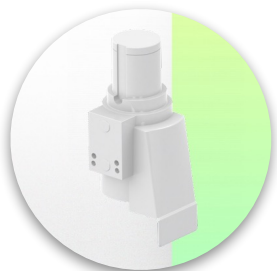


Adapter voor Maquet-anesthesie apparatuur
Kegeladapter voor model FLOW i

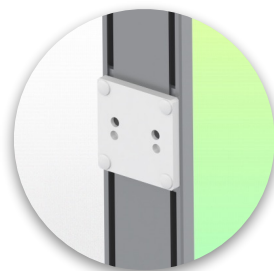

Adapter voor Löwenstein anesthesie apparatuur
Medische adapter voor Leon / Leon plus

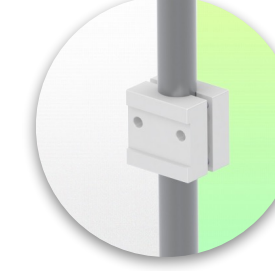

Universele ronde buisklem
V-flens voor montage op ronde buis \varnothing 23 - 40 mm

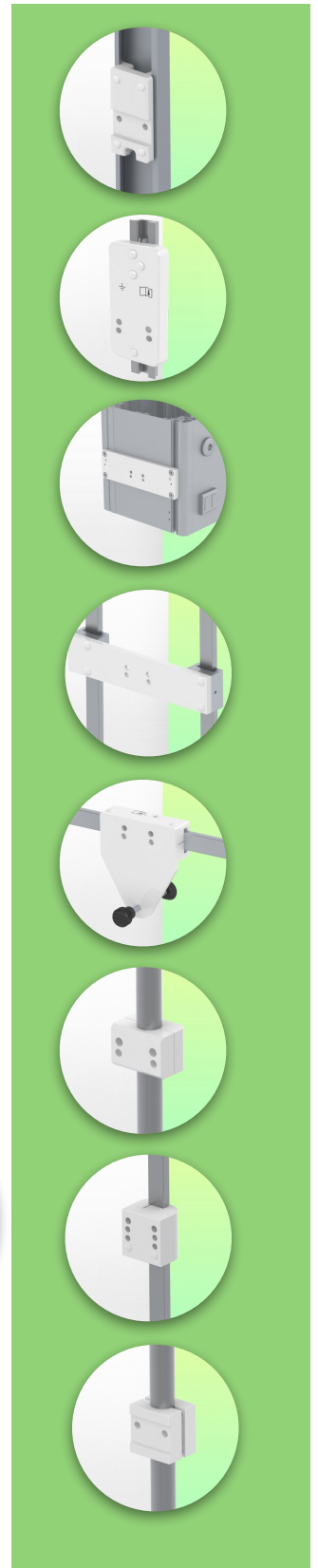


Montage-informatie - montage-opties

Referentie: WM 226.106


Medische Combo-arm Plooibaar, 300 mm draaibaar voor scherm en toetsenbord, (ondersteund gewicht tot 18 Kg), vloer- of plafond kolom bevestiging

Waar wilt u de draagarm bevestigen?


In het ziekenhuis zijn er verschillende manieren om onze beugels te bevestigen: ronde buis, standaard rail, wandrail of op een anesthesie apparaat. Wij zullen u altijd voorzien van de adapter die u nodig heeft.

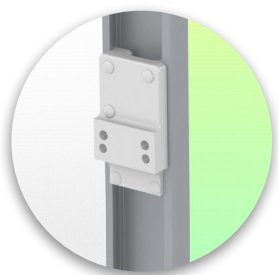


**Adapter voor anesthesie
apparaat (alle
leveranciers)**
H 80 mm, met bestaande
zijhekken

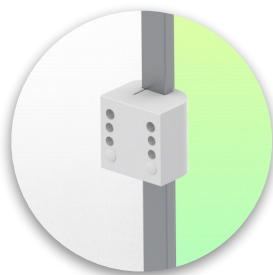

**Klem voor een verticale
standaard rail**
Voor montage op standaard
rail 10 x 25 mm

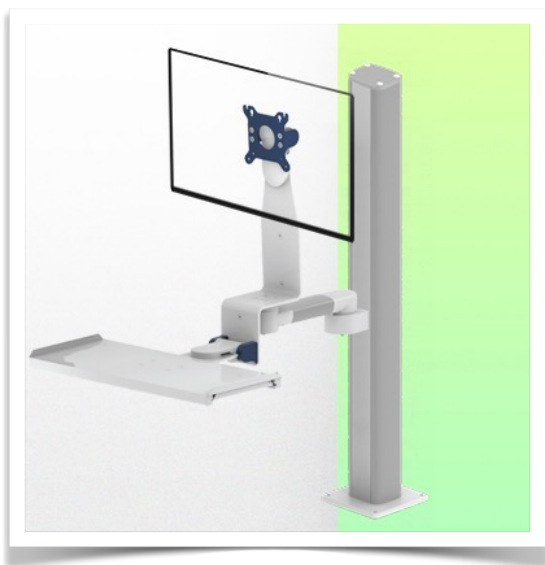

Onze medische montagesystemen worden beschouwd als 's werelds beste op het gebied van geavanceerde hygiënecontroles en omvatten kabelintegratie, een onderhoudsvrije garantie van 5 jaar en naleving van de medische normen. We zijn gewoon de beste ter wereld in wat we doen.

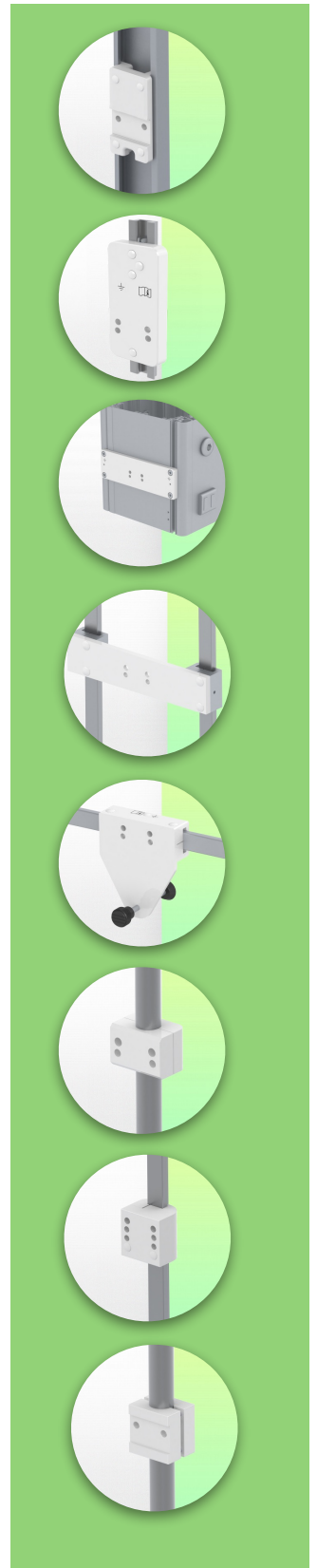


Technisch plan van deze Combo configuratie

Referentie: WM 226.106

Medische Combo-arm Plooibaar, 300 mm draaibaar voor scherm en toetsenbord,
(ondersteund gewicht tot 18 Kg), vloer- of plafond kolom bevestiging

SIDE VIEW - VUE DE CÔTE - ZIJAANZICHT

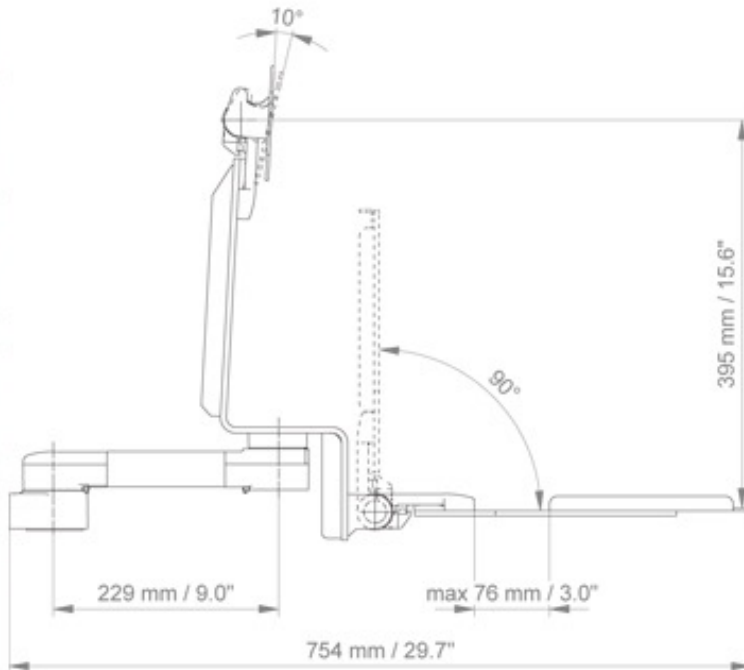

TOP VIEW - VUE DE DESSUS - BOVEN BEKIJKEN

