


Presentatie

Referentie: WM 260.294CT


In hoogte verstelbare medische Dubbel arm monitoring Philips Intellivue Séries, tafel kolombevestiging. Ondersteunde weegschaal voor gewichtsverdeling van 16 tot 22 Kg. Bevestiging aan de bovenzijde

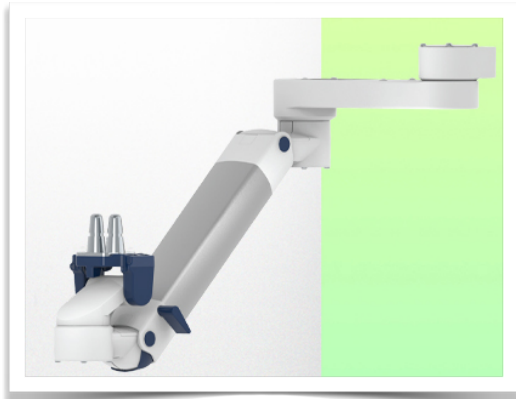

Cette colonne possède deux rails de fixation pour les différents éléments qui y seront fixés. (1 rail à l'avant de la colonne, 1 rail à l'arrière)

This column has two fixing rails for the different elements that will be fixed to it (1 rail at the front of the column, 1 rail at the back)

Deze zuil heeft twee bevestigingsrails voor de verschillende elementen die eraan bevestigd zullen worden (1 rail aan de voorkant van de zuil, 1 rail aan de achterkant)

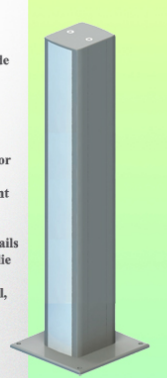

Dubbele medische arm met 5" dompelplaat voor in hoogte verstelbare bewaking, Tafel kolom bevestiging.



Ondersteunde gewichtsschaal van 16 tot 22 kg.

Compatibel met Dräger- en GE-monitoring. Bevestiging aan de bovenzijde

Volledige kabelintegratie en infectiepreventie dankzij gemakkelijk te reinigen oppervlakken maken deze arm ideaal voor spoedeisende hulp. Hoogteverstelling voor ergonomische, aangepaste positionering van de monitor. Met deze Horizontale Double Medical Arm met gasveer-hoogteverstelling kan de monitor perfect worden vastgezet, georiënteerd en afgesteld. Hij is gecoat met een antimicrobieel middel voor hygiëne en reiniging tot in het kleinste detail. Het moderne ontwerp is speciaal ontwikkeld voor zorgomgevingen.

Technische specificaties:


* Geïntegreerde kabeldoorvoer * Potentiaalvereffening * Tafel Kolom bevestiging, waarvan verschillende hoogtes beschikbaar zijn (500 - 300 mm). Deze kolommen kunnen eenvoudig op maat worden gezaagd. Alle kabels worden ook door de kolom geleid (zie optie op volgende pagina's) * Deze gasbediende dubbele arm schuift eenvoudig in de kolom rail, stelt zich dan in op de gewenste hoogte en vergrendelt op zijn plaats. Hij heeft een veiligheidsstopknop voor de hoogteverstelling, waardoor de arm in de gekozen positie kan blijven staan. * De kop van deze arm is compatibel voor Philips Intellivue Series monitoren * Compatibel met monitoren die niet meer dan 16-22 kg wegen * Monitor kantelen: 21° naar beneden en 20° naar boven * Schermrotatie: 130° naar rechts, 180° naar links. * Armrotatie: 90° rechts, 90° links * Hoogteverstelling: 438 mm * Totale lengte 761 mm * Al onze medische armen voldoen aan CE, ROHS, Medical Grade, voorschriften MDD 93/42 ECC. * Kleur: RAL 5013 kobaltblauw en RAL 9016 verkeerswit * Garantie: 5 jaar

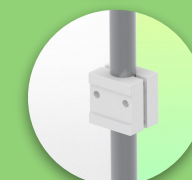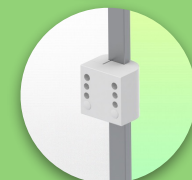

Technische specificaties

Referentie: WM 260.294CT


In hoogte verstelbare medische Dubbel arm monitoring Philips Intellivue Séries, tafel kolombevestiging. Ondersteunde weegschaal voor gewichtsverdeling van 16 tot 22 Kg. Bevestiging aan de bovenzijde

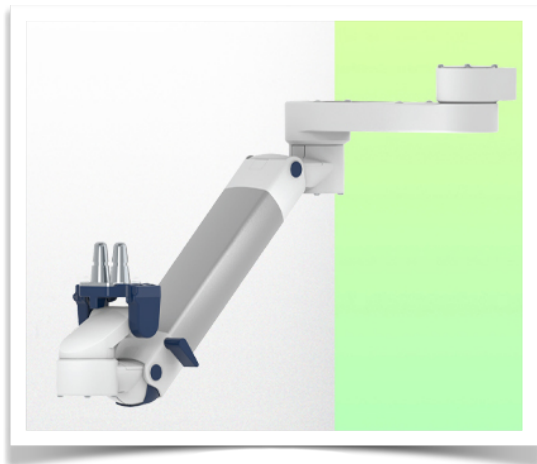


Cette colonne possède deux rails de fixation pour les différents éléments qui y seront fixés. (1 rail à l'avant de la colonne, 1 rail à l'arrière)

This column has two fixing rails for the different elements that will be fixed to it (1 rail at the front of the column, 1 rail at the back)


Deze zuil heeft twee bevestigingsrails voor de verschillende elementen die eraan bevestigd zullen worden (1 rail aan de voorkant van de zuil, 1 rail aan de achterkant)

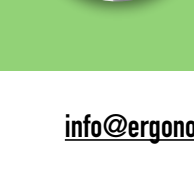


SIDE VIEW - VUE DE CÔTE - ZIJAAZICHT

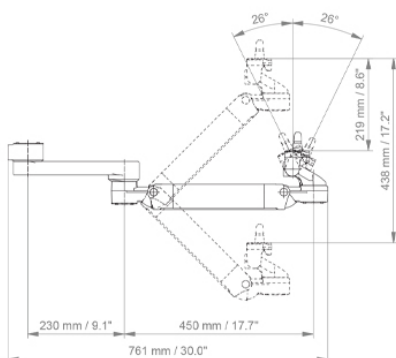

TOP VIEW
VUE DE DESSUS - BOVEN BEKIJKEN

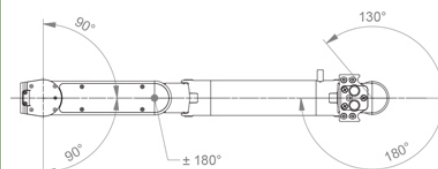

Balancing range - Echelle d'équilibrage
Balancerings bereik

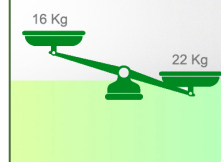

Monitoradaptatie: Philips Intellivue Series

Kleur: Decoratieve onderdelen: RAL 5013 kobaltblauw

Aluminium onderdelen: RAL 9016 verkeerswit

Max. draagvermogen draagarm: 22 kg

Max. belasting monitoradaptatie: 18 Kg

Balansweegschaal voor deze medische arm: 16 - 22 Kg

Productgewicht: 4,9 Kg

Hoogteverstelling: parallel mechanisme voor een constante kijkhoek
Veiligheid: Heeft een veiligheidsstopknop voor hoogteverstelling, waardoor de medische arm in de gekozen positie blijft staan.





Installatie-informatie - Tafel Kolom

Referentie: WM 260.294CT

In hoogte verstelbare medische Dubbel arm monitoring Philips Intellivue Séries, tafel kolombevestiging. Ondersteunde weegschaal voor gewichtsverdeling van 16 tot 22 Kg. Bevestiging aan de bovenzijde

Tafel kolom:



Om deze medische arm te installeren, moet u een van onze medische kolommen gebruiken. Deze zijn verkrijgbaar in standaard hoogtes van 500 en 300 mm. Aangepaste hoogtes zijn op verzoek verkrijgbaar. Afdekkappen en eindkappen worden bij elke bestelling geleverd.

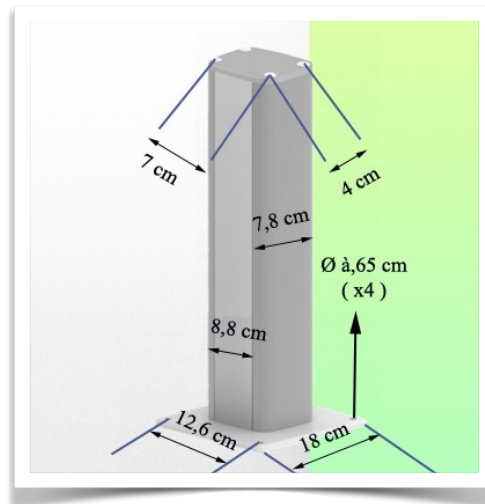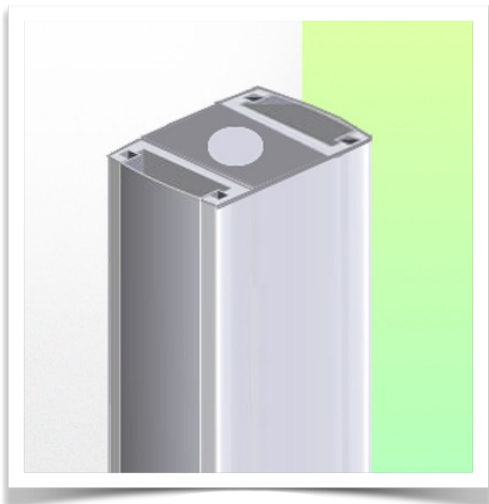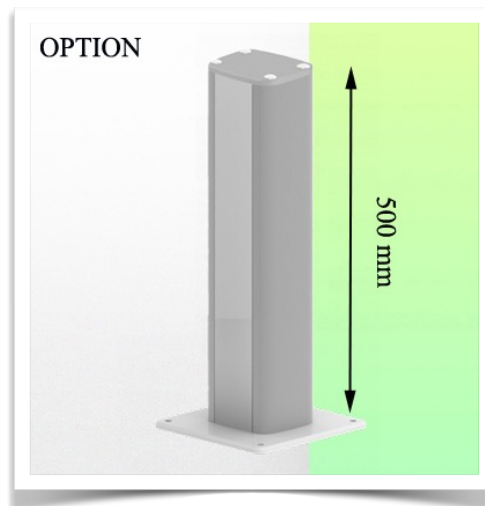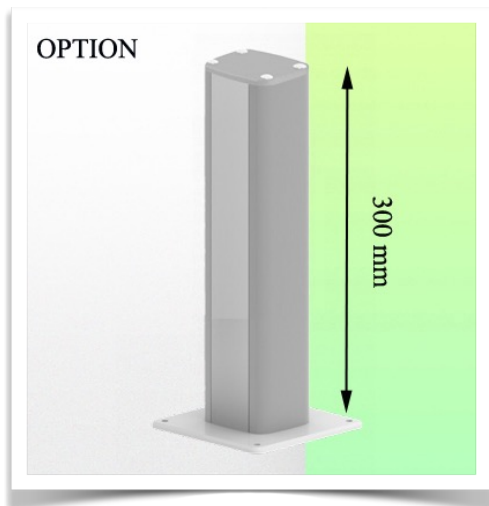

Presentatie

Referentie: WM 260.294CT




In hoogte verstelbare medische Dubbel arm monitoring Philips Intellivue Séries, tafel kolombevestiging. Ondersteunde weegschaal voor gewichtsverdeling van 16 tot 22 Kg. Bevestiging aan de bovenzijde

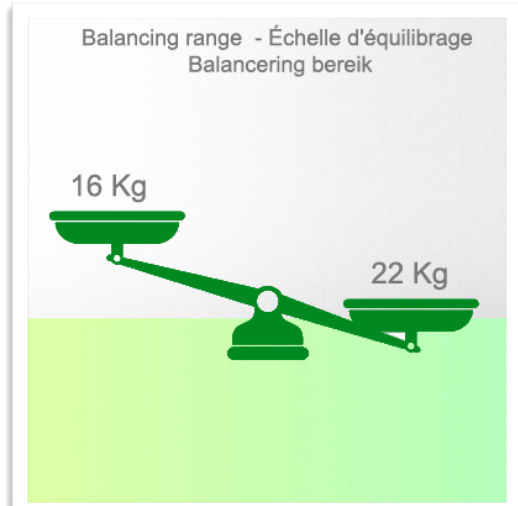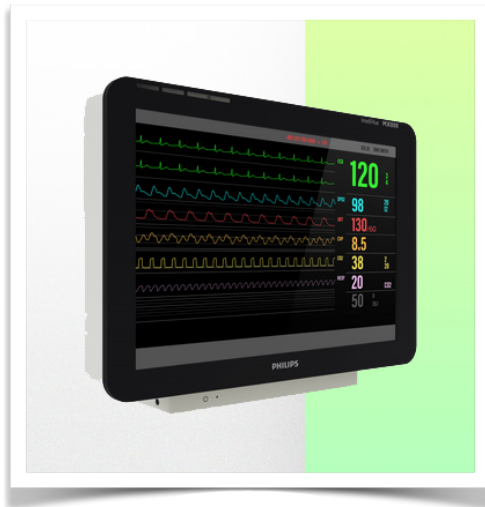

Presentatie

Referentie: WM 260.294CT

In hoogte verstelbare medische Dubbel arm monitoring Philips Intellivue Séries, tafel kolombevestiging. Ondersteunde weegschaal voor gewichtsverdeling van 16 tot 22 Kg. Bevestiging aan de bovenzijde

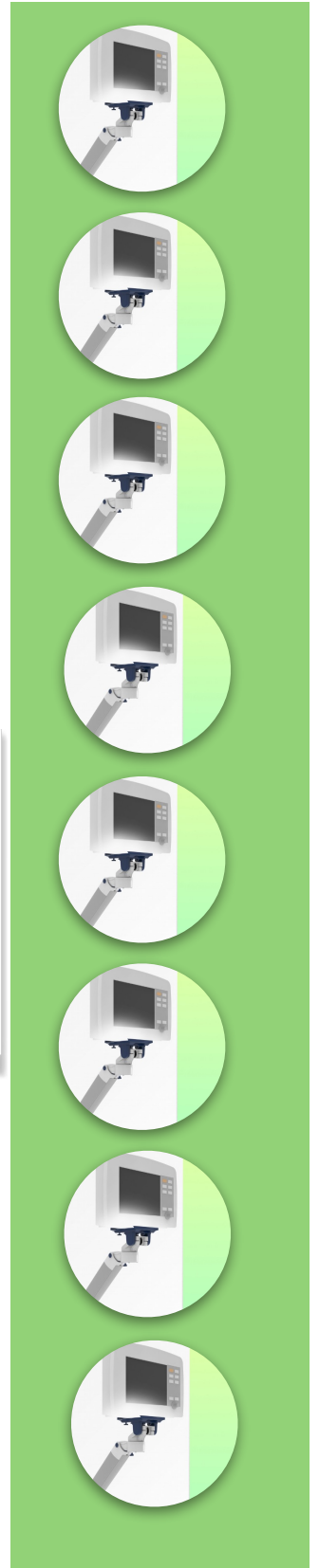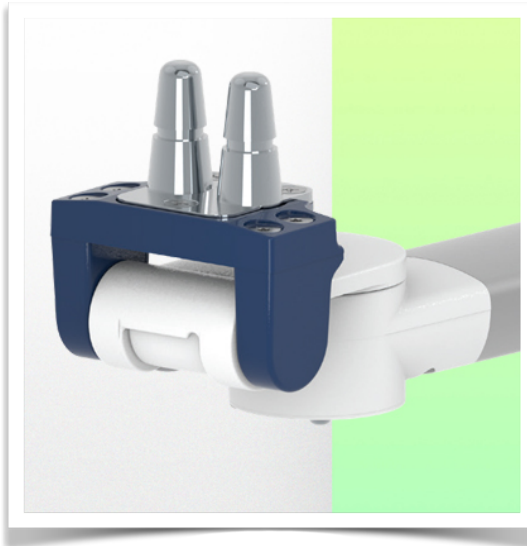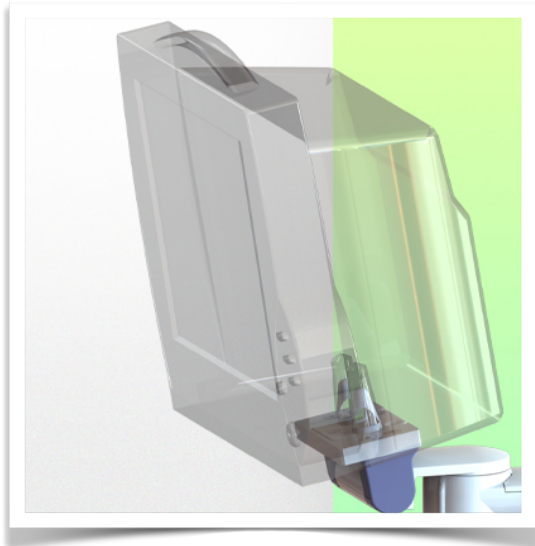

Philips Intellivue-serie bewakingsadapter

Al onze medische armen kunnen worden uitgerust met deze aanpassing, waarvan hier enkele afbeeldingen worden getoond.

